



ST - 30F

Sepray[®] ST - 30F

Volüm Hedefli Solunum Destek Cihazı



Kronik solunum yetmezliği hastaları için akıllı çözümler



Quality Service

ST - 30F


Tedavi
arayüzü

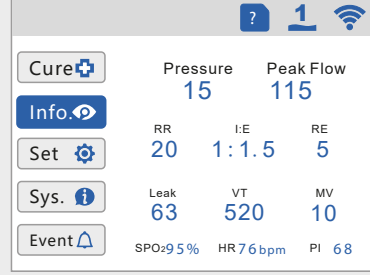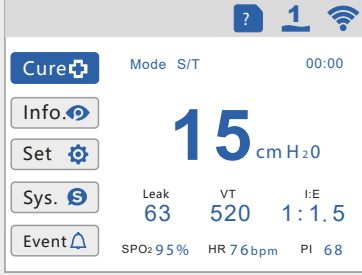

Takip
arayüzü

Tedavi verilerini gerçek zamanlı takip imkanı

3.5" renkli ekran

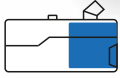

Tasarım

Bütünleşik yapı

Ana ünite ve nemlendirici bir arada

Kompakt ve taşınabilir

Boyutlar: 24.3(u) x 16.7(g) x 13(y) cm

Ağırlık: 1.65kg



Özellikli nemlendirici

Cihaza su kaçımayı engelleyen patentli su kabı

Ayarlanabilir ısıtma seviyesi





Özellikler

Değişken
ventilasyon modları

CPAP, S, T, S/T modları

VAT
(Hedef Garanti Teknolojisi)

Tedavi etkinliği için hedef tidal volümü garantiler

AST (Otomatik
Senkronizasyon Teknolojisi)

Ventilatör ve hasta arasında mükemmel
uyumu sağlar

COMF,
Basınç Rahatlatma Teknolojisi

Tedavinin konfor seviyesini ve hasta
cihaz uyumunu artırır

SpO2 Takip Özelliği

Tedavi sırasında kandaki oksijen miktarı
opsiyonel olarak takip edilir

Çoklu Parametre Takibi

11 farklı parametre gerçek zamanlı olarak
cihaz ekranında görüntülenebilir

Yüksek performanslı motor

Güçlü, sessiz ve etkin hava kaçağı yönetimi

Parametre	ST 30 - F
Tedavi Modu	C P A P S T S / T
Basınç Aralığı	4 c m H ₂ O - 30 c m H ₂ O
Hedef VT	200 ml- 1500 ml
COMF	1- 3 Seviye
RR	5 B P M - 30 B P M
I:E	1:1- 1:2
Yükselme Süresi	1- 4 Seviye (200ms - 500ms)
Rampa Zamanı	0- 45 dk Ayarlanabilir
Nemlendirme	1- 5 Seviye
Oto Aç/Kapa	Mevcut
Uyarı	Mevcut
LED	Mevcut
WiFi	Mevcut
Data Saklama	TF Card (4 Gb)
İzleme	Basınç, Hava Kaçağı, V T , M V , Tepe Akım , I:E , R R , R E
Dil	C N / E N
SpO2	Opsiyonel



RESPİTEK

İstanbul Merkez Ofis

Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:35/1 Kat:1 Üsküdar / İstanbul
Tel : 0216 545 8080

www.respitek.com.tr